

# フットケア用品のご案内

～器械・器具・クリーム類・書籍等～



「爪切り屋」メディカルフットケア JF 協会®  
〒179-0085 東京都練馬区早宮 3-12-5  
TEL:03-3992-1824 FAX:03-3992-3309

# 器具のご案内



## マイクログラインダー

ダイヤモンドバー・キャップサンダーを装着し爪・角質などを削ります。



## ダイヤモンドバーセット

マイクログラインダーに装着し使用します。



## キャップサンダーセット

マイクログラインダーに装着し使用します。




## キューティクルニッパー オリジナルニッパー

爪・爪周囲の皮膚を切るのに使用します。



## ビューティフット(大・小)

踵や厚くなった皮膚を削るのに使用します。

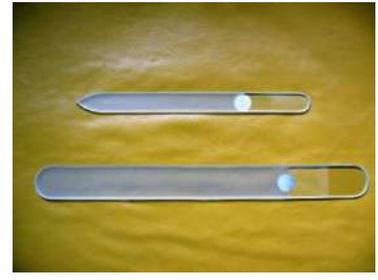

## ガラス爪ヤスリ(大・小)

爪の形を整えるのに使用します。  
大;約 20 cm 小;約 14 cm



## クリーム各種

爪の保護・施術前の手指の保護・トリートメントに使用します。



## ソンデ

爪周囲の角質除去に使用します。



## ニッパーキャップ

ニッパーの刃先を保護します。




## リーフレット

「イキイキ満足習慣」社会保険出版社  
「足と爪のケア」東京法規出版



## 宮川晴妃 著作本

「メディカルフットケア実践マニュアル」東京法規出版  
「メディカルフットケアの技術」日本看護協会出版会  
「高齢者のフットケア」厚生科学研究所

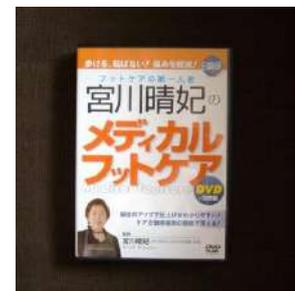


## DVD

「宮川晴妃のメディカルフットケア」日総研出版  
**販売終了**

# ニッパーのご案内


<オリジナルニッパーJF1240>

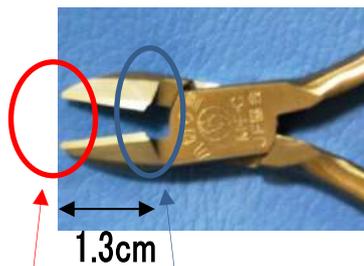

11.5cm

新潟県三条市で製造しており、切れ味、刃のかみ合わせがとても良いステンレス製の爪切りです。  
刃の先端が尖っていないため、患者様の皮膚に当たっても傷をつけにくくなっています。  
また、刃の根元が突き出す形になっていますので、ニッパー型を使い慣れない方でも爪を挟みやすく、切る部分を目で確認しやすくなっています。  
刃の研ぎも可能ですので、長く使えます。


<キューティクルニッパー>

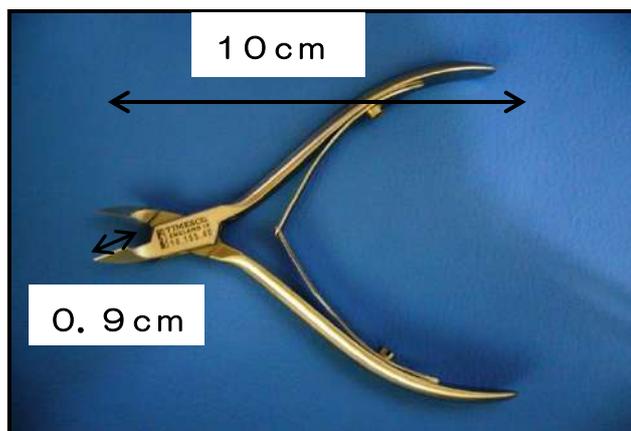

イギリスTIMESCO社製のキューティクルニッパーです。  
通常の厚さの爪を切るのに小回りが利いて大変使いやすくなっています。  
ステンレス製。

# ゾンデのご案内

<JF404>

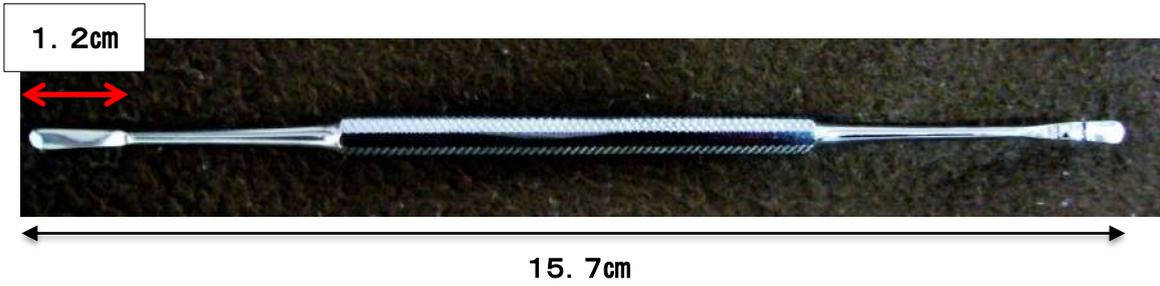

新潟県三条市でオリジナルで製造していただいております。 ステンレス製。



良く使う方の先端はこのような平たいへら状です。  
へらの幅; 0. 3cm。



もう一方の先端は、横から見ると(不鮮明ですが)  
上記のへらを曲げてあり、鉗型になっています。

# マイクログラインダーについて

## ◎UM-JET II

特長 UM-JET に新機能(正逆回転機能  
クイックストップ機能 等)を追加  
負荷をかけた際にも回転数の低下を防ぎ、振動・  
ノイズを抑えたスムーズな作業  
フットスイッチ・フットコントローラー(別売り)対応

### 仕様 ◎モーターハンドピース

- ・ 回転数 : 3,500~35,000rpm
- ・ 重量、寸法 : 200g、Φ27.5×L144.5 mm
- ・ UM-JETのコントローラーにも接続できます

### ◎コントローラー

- ・ 入力 : AC100V、50/60Hz、23VA
- ・ 出力 : DC3~30V、0.4A
- ・ 重量、寸法 : 1.7kg、130(W)×132(D)×87(H) mm



UM-JET II

## ◎G 5



### 仕様

#### モーターハンドピース

寸法: Φ23.6(最大径)×129(L)mm

重量: 180g

#### コントローラー

寸法: 117(W)×147(D)×89(H)mm

重量: 1.4kg

出力: DC2.2~30V

### 付属品



### ◎G 3 ポータブル、充電タイプ



#### 仕様

##### モーターハンドピース

寸法：Φ24.2(最大径)×120(L)mm

重量：160g

最高回転数：20,000rpm

##### コントローラー

寸法：65(W)×137(D)×37(H)mm

重量：250g

出力：DC2～12V



カラーバリエーション

シルバー、ゴールド、ホワイト、ピンク、ブラック、レッド

#### 付属品



### ◎Up220



#### 仕様

##### モーターハンドピース

寸法：Φ24(最大径)×136(L)mm

重量：165g

最高回転数：20,000rpm

##### コントローラー

寸法：80(W)×145(D)×108(H)

重量：950g

出力：DC3～30V

#### 付属品




# アタッチメント(ビット)のご案内

## ■ ネイル用アタッチメント


	<b>ラージパレルカーバイトバー</b> ファイン C 1701 ミディアム C 1702 コース C 1703	アクリルの厚さ調整 Cカーブの整え 長さ調節やオフ スマイルラインの削り出し  熱を持ちにくく最も早く削れます。 ビットを爪の端面に入れるときはそっと 軽いタッチにしてください。 削り過ぎや肌への接触にご注意ください。 7,000~15,000rpmでご使用ください。		<b>ラージパレル ダイヤバー</b> スーパーファイン D 1701 SF ファイン D 1701	プレパレーション ルーズスキンの除去  2,000~4,000rpmでご使用ください。			
		<b>ラージパレルホワイトシルバー</b> ファイン C 1701 W ミディアム C 1702 W コース C 1703 W Xコース C 1704 W				<b>ラージパレル ダイヤバー</b> ミディアム D 1702 コース D 1703 スーパーコース D 1704	アクリルの厚さ調整 Cカーブの整え 長さ調節やオフ スマイルラインの削り出し  ビットを爪の端面に入れるときはそっと 軽いタッチにしてください。 削り過ぎや肌への接触にご注意ください。 7,000~15,000rpmでご使用ください。	
		<b>ラージパレルカーバイトバー (ゴールド)</b> ファイン C 1701 G ミディアム C 1702 G コース C 1703 G				<b>コーン ダイヤバー</b> ファイン D 1709 ミディアム D 1710 コース D 1711	Cカーブの整え ラインストーンの入りのハマ込み 裏側の段差削り  ナチュラルスキンをキズつけないように 注意して下さい。 7,000~15,000rpmでご使用ください。	
		<b>スモールパレルカーバイトバー</b> ファイン C 1713 ミディアム C 1714				<b>アンダーネイル ダイヤバー</b> D 1712		
<b>スモールパレル ホワイトシルバー</b> ファイン C 1713 W ミディアム C 1714 W コース C 1715 W			<b>フットボール ダイヤバー</b> ファイン D 1713 ミディアム D 1714 コース D 1715					
<b>スモールパレルカーバイトバー (ゴールド)</b> ファイン C 1713 G ミディアム C 1714 G			<b>フレンチ ダイヤバー</b> D 1717		スマイルライン削り 7,000~12,000rpmでご使用ください。			
<b>テーパーパーレルカーバイトバー</b> C 1710 ラウンド C 1710 R			<b>ちびブラシ</b> WNHP 01	ダストオフ 2,500~4,500rpmでご使用ください。				
<b>オーバルカーバイトバー</b> C 1720			<b>セーム皮バフ</b> 4 CH 21 HP	爪甲のつや出し(要研磨剤) 2,000~5,000rpmでご使用下さい。				
	<b>コーンカーバイトバー</b> ミディアム C 1716 スーパーファイン C 1716 SF	Cカーブの整え ラインストーンの入りのハマ込み 裏側の段差削り  ナチュラルスキンをキズつけないように 注意して下さい。 7,000~15,000rpmでご使用ください。		<b>コットンバフ</b> CC 24 HP	セーム皮バフ使用後の仕上げ 2,000~5,000rpmでご使用下さい。			
	<b>アンダーネイルカーバイトバー</b> C 1717 ロング C 1717 L				<b>アートビットセット</b> ドリル ST 203-012 フィッシャー ST 38-018 コーン BH 24 P	ピアス穴開け 4,000~10,000rpmでご使用ください。 穴広げ 6,000~12,000rpmでご使用ください。 穴仕上げ 6,000~12,000rpmでご使用ください。		
<b>オニクリーン</b> 406 LRS-012 407 RS-012		ルーズスキンの除去 ナチュラルスキンをキズつけないように 注意して下さい。 4,000~12,500rpmでご使用ください。	<b>ソフトオーバル</b> DC102		プレパレーション 2,000~7,000rpmでご使用ください。			
	<b>ベビーオーバル</b> C 1720 B	爪周りの角質の除去 細部のお手入れ  ナチュラルスキンをキズつけないように 注意して下さい。 4,000~12,500rpmでご使用ください。			<b>マンドレール</b> S 1710	パレルカーバイトと同じ  掃除をせず使い捨て感覚で清潔です。 ソフトなタッチでジェルには最適です。 初心者にも安心して使えます。 2,000~15,000rpmでご使用ください。		
	<b>ベビーコーン</b> C 1716 B				<b>サンディングバンド</b> ファイン S 1701 ミディアム S 1702 コース S 1703			
	<b>キューティクル・プッシャー</b> NF 01	キューティクルのお手入れ 2,500~4,500rpmでご使用ください。						



ベーシックネイル  
ビットセット  
**PBS5**  
C1702W,C1710,C1716  
ST203-012  
S1710,S1703 (5ヶ)

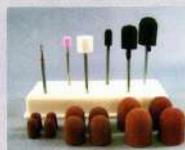

ベーシックフット  
ビットセット  
**KBS6**  
b-2,a-1,a-2,b-5M,b-10M,b-13M (各一ヶ)  
b-5C,b-5F,b-10F,b-13C,b-13F (各2ヶ)

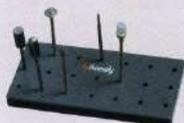

ビットスタンド  
KZ 11-101



ビットケース (20本用)  
BBC 20



ビットケース (120本用)  
BBC 120

## ■フット用アタッチメント

	ボーラフレーザ (S)	b-1	爪周辺の角質やウオノメのお手入れ 頑固な爪のお手入れ		ラバーマンドレール (Φ5)	b-5M	各サイズのキャップサンダーをかぶせて使 います。
	(M)	b-2	10,000~20,000rpmでご使用ください。		(Φ7)	b-7M	
	ゴールド (L)	b-3			(Φ10)	b-10M	
	シルバー	b-3S			(Φ13)	b-13M	
	ゴールド (LL)	b-3L			(Φ16)	b-16M	
	ホワイトポイント	a-1	拇指爪甲のお手入れ 7,000~12,000rpmでご使用ください。		キャップサンダー (Φ5)	コース b-5C	角質処理をスムーズに行います。
	ピンクポイント	a-2	第2~5趾爪甲のお手入れ 5,000~15,000rpmでご使用ください。		(Φ7)	コース b-7C	5~10Φ: 10,000~20,000rpm 13Φ: 5,000~10,000rpm 16Φ: 2,000~8,000rpm でご使用ください。
	グリーンポイント	P 1003			(Φ10)	コース b-10C	
	スモール	P 2002	ルーズスキンの除去。 5,000~15,000rpmでご使用ください。		(Φ13)	コース b-13C	
	ミディアム	P 2003			(Φ16)	コース b-16C	
	ラージ	P 2004			キャップサンダー (Φ5)	ファイン b-5F	粗目タイプの後、角質部分を清らかにします。
	ダイヤモンド	コース BH-60RC	角質の除去。 5,000~15,000rpmでご使用ください。		(Φ7)	ファイン b-7F	5~10Φ: 10,000~20,000rpm 13Φ: 5,000~10,000rpm 16Φ: 2,000~8,000rpm でご使用ください。
	ファイン	BH-60R	BH-60RCの使用後に使うとより効果的です。 5,000~15,000rpmでご使用ください。		(Φ10)	ファイン b-10F	
	シリコンポイント	F 500	爪甲のつや出し、細部の角質除去。 5,000~15,000rpmでご使用ください。		(Φ13)	ファイン b-13F	
	ファイン	S-100	足全体を滑らかにします。 5,000~10,000rpmでご使用ください。		(Φ16)	ファイン b-16F	
	コース	S-180	S-100ご使用後に使うとより効果的です。 5,000~10,000rpmでご使用ください。				
	商品名(サイズ)	用途					
	長さ	名番	特徴と注意				

## ■アタッチメント メンテナンス用品

### ダイヤモンドドレッサー DD200

アタッチメントの面取り、ドレス(成形)にピッタリ。  
(対象: ホワイトポイント・ピンクポイント・グリーンポイント・  
シリコンポイント等)  
推奨回転数 5,000~10,000rpm

#### ドレッサーの使用法

目詰まり等で切削力の落ちたアタッチメントの切削力を復活。



側面のドレス  
ドレッサーに対して水平に当て  
ます。



上部のドレス  
ドレッサーの側面を上半分に当  
ててドレスします。



面取り  
面取りを行う場合は、ドレッサーに  
対して斜めにビットを当てます。



面取り  
面取りを行う場合は、ドレッサーに  
対して斜めにビットを当てます。

### ビットクリーナーセット

E 2611 ST

ビット掃除  
サビ落とし

### ビットクリーナーブラシ

E 2611

指にビットが当たらないように注意して  
汚れを落として下さい。

#### ビットクリーナーブラシの使用法



①  
ホルダーに挿したビットク  
リーナーブラシでマシ  
ンに装着したビットを軸周  
りにします。



②  
頑固な汚れの場合、マシンに  
ビットクリーナーブラシを装  
着して低速で回転させなが  
ら、ホルダーに装着したビ  
ットを軸周りにします。

### 超音波洗浄器 専用洗浄液



超音波洗浄器  
UL-600  
タイマー: 3分  
製品寸法: 約 幅 18×奥行 21×高さ 15cm  
タンク寸法: 約 幅 14×奥行 12×高さ 4cm  
アタッチメントだけでなく、小器具類の洗浄にも効果的。  
こびりついた汚れを浮かせて落とす。



防錆洗浄液 ソニックフレッシュ  
50ml SF50  
500ml SF500  
防錆・除錆洗浄で、錆びずに清潔。  
50~100倍に希釈してご使用いただけます。

超音波洗浄器使用の際の注意事項  
※ 水を入れずにスイッチを入れないでください。  
※ ビット同士が重ならないように置いてください。  
※ 固まったジェルなどは落ちません。  
※ 溶剤で落としてから超音波洗浄器に入れてください。  
※ 専用の洗浄液を使用してください。

#### 超音波洗浄器を使用して洗浄・除菌




①  
超音波洗浄器で洗浄し  
ます。



②  
流水で流しながら浮いた  
汚れをブラシで落とす  
ます。  
※衛生上、ダストを落とす  
ブラシとは別のブラシを  
用意してください。



③  
乾いた布で拭きます。  
ビットの隙間も綿棒など  
拭いてください。

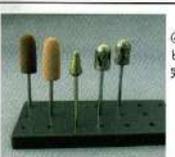

④  
ビットスタンドに立てて  
完全に乾燥させます。

※ 製品の仕様などにつきましては、改良および改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご容赦願います。 ※ 印刷の関係により、色が実際の製品と若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

# ビットセット内容

## ◎ダイヤモンドバーセット NMS-FC

全 12 本

オーバルカーバイトバー		C1720
ラージパレルダイヤモンド(ミディアム)		D1702
スモールパレルダイヤモンド(ミディアム)		D1706
コーンダイヤモンド(ファイン)		D1709
〃 (ミディアム)		D1710
〃 (コース)		D1711
コーンカーバイトバーSF		C1716SF
フットボールダイヤモンド(ファイン)		D1713
〃 (ミディアム)		D1714
〃 (コース)		D1715
フィッシャー		ST38-018
ボーラーフレーザー(M)		b-2

ビットケース BBC20 にセット



\*写真はイメージです

## ◎キャップサンダーセット KMS-FC

全 11 種

ボーラーフレーザー(S)		b-1
ピンクポイント		a-2
ラバーマンドレルΦ5		b-5M
〃 Φ13		b-13M
〃 Φ16		b-16M
キャップサンダーΦ5(細目) 2ケ		b-5F
〃 Φ13(〃) 2ケ		b-13F
〃 Φ16(〃) 2ケ		b-16F
キャップサンダーΦ5(粗目) 2ケ		b-5C
〃 Φ13(〃) 2ケ		b-13C
〃 Φ16(〃) 2ケ		b-16C

ビットケース R12P にセット




\*写真はイメージです

## ◎フット用ビットセット KBS-6

全 12 種

ラバーマンドレール Φ5		b-5M
" Φ10		b-10M
" Φ13		b-13M
キャップサンダーΦ5(細目) 2ケ		b-5F
" Φ10(〃) 2ケ		b-10F
" Φ13(〃) 2ケ		b-13F
キャップサンダーΦ5(粗目) 2ケ		b-5C
" Φ10(〃) 2ケ		b-10C
" Φ13(〃) 2ケ		b-13C
ホワイトポイント		a-1
ピンクポイント		a-2
ポーラフレーザー(M)		b-2

ビットケース R-12P にセット

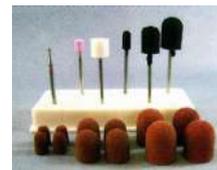

\*写真はイメージです

## ◎フット用パーフェクトセット KBS-7SP

全 7 本

ポーラフレーザー(L)シルバー		b-3S
ダイヤモンドポイントメガ(ファイン)		DR1080
" (コース)		DR1030
マウンテンダイヤモンドバー(ファイン)		BH60R
" (コース)		BH60RC
シリコンポイント#180		S-180
" #100		S-100

ビットケース BBC20 にセット



\*写真はイメージです

## おすすめ商品

### ● フットケア用ビット



型番:b-1(S)φ1mm, b-2(M)φ1.8mm  
品名:ポーラフレーザー-S.M  
爪周辺の角質の除去、ウオノメのお手入れ



型番:b-3S  
品名:ポーラフレーザー-L  
肥厚した部分の除去



型番:b-5M, b-10M, b-13M  
品名:ラバーマンドレール  
各サイズのキャップサンダーを  
取り付けてご使用下さい



型番:b-5C(粗), b-5F(細)  
品名:キャップサンダー φ5mm  
角質のお手入れ, 小爪のお手入れ



型番:b-10C(粗), b-10F(細)  
品名:キャップサンダー φ10mm  
角質のお手入れ



型番:b-13C(粗), b-13F(細)  
品名:キャップサンダー φ13mm  
角質のお手入れ

※キャップサンダーをお使いの際は、滑らかにな仕上げる為に、粗目(C)→細目(F)の順でご使用して下さい。



型番:C1720  
品名:オーバルカーバイド  
爪甲の厚さ削り



型番:D1709(細), D1710(中)  
品名:コーンダイヤモンド  
爪甲の削り



型番:D1714  
品名:フットボールダイヤモンド  
甘皮や爪甲細部の削り



型番:C1716SF  
品名:コーンスーパーファイン  
爪甲の仕上げ用



型番:C1716B  
品名:ベビーコーン  
爪甲細部の削り



型番:C1720B  
品名:ベビーオーバル  
爪甲細部の削り

### ● フットケア器具用お手入れ



頑固な汚れと軽い汚れに  
便利な2WAYビットクリーナー



ダブルビットクリーナー



落ちにくい汚れを音波の  
振動で浮かせて落とす  
(3分タイマー付)



超音波洗浄機

フットケアにはビットの  
お手入れも欠かせません!

50~100倍希釈で10分間浸漬  
除菌も出来て錆も防ぐ!



超音波洗浄機お買い上げの方に  
今なら専用洗浄液をプレゼント!!

## 超音波の振動で細部まで汚れを落とす!!

ビット・小器具類など色々な製品のお手入れに最適!!



ビット



ニッパー




アクセサリ




金属バンド



メガネ

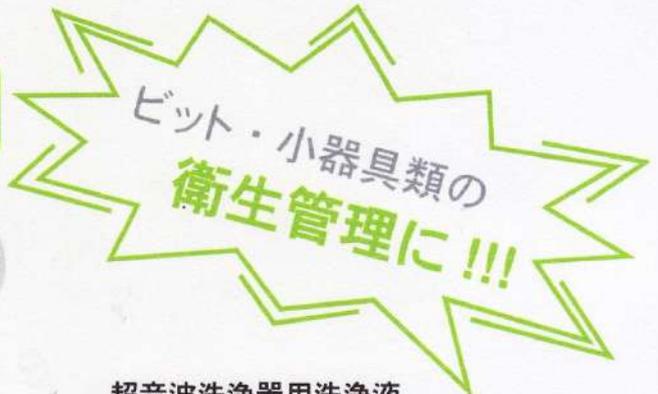

### 超音波洗浄器 ウルトラソニッククリーナー UL-600

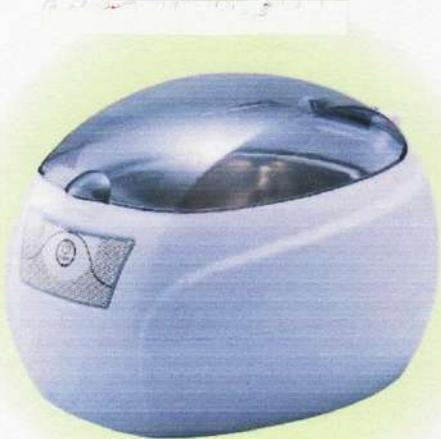

- ・超音波洗浄器がお手ごろ価格で登場。
- ・3分間の安心タイマー付き。
- ・コンパクトサイズなので置き場所に困りません。

### 超音波洗浄器用洗浄液 SONIC FRESH

SF500 (500ml入り)



SF50 (50ml入り)



※50倍程度に希釈して御使用下さい。

- ・優れた洗浄力・・・弱アルカリ性なので、中性洗剤よりも油脂やたんぱく質などの汚れを効果的に落とせます。
- ・防錆効果有り・・・防錆剤配合により浸け置きしても安心。ビット・小器具類をサビから守ります。
- ・除菌効果有り・・・イルガサン配合により除菌効果あり。約10分間浸漬除菌して下さい。

## ビット洗浄方法

ビットは清潔に保つことにより、お客様への信頼感を与えます。また余計なダストを落とすことにより切れ味を長期間維持できます。




①超音波洗浄器で洗浄する。洗浄液はSONIC FRESHを50倍程度に希釈したものを使用し、約10分間程の浸漬除菌をする。



②流水で流しながら、浮いた汚れをブラシで落とす。※衛生上、ダストを落とすブラシとは別のブラシを用意して下さい。



③乾いた布で水を拭き取る。ビットの隙間も綿棒などを用いて細部まで丁寧に拭く。

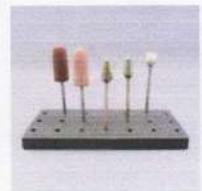

④ビットスタンドなどに立てて、しっかりと乾燥させる。

## 小器具類洗浄方法



①超音波洗浄器で洗浄する。洗浄液はSONIC FRESHを50倍程度に希釈したものを使用し、約10分間程の浸漬除菌をする。



②流水で全体の浮いた汚れを流し落とす。



③乾いた布で全体の水分を丁寧に拭き取る。



④よく乾燥させた後に、可動部及び刃先部にオイルを注油する。

## クリーム類のご案内

★ファインハイジエニククリームE 860g (マッサージクリーム) 坂本高生堂  
(商品はポンプタイプです)

下肢トリートメントマッサージ時に使用します。(要拭き取り)

◇◆成分表示◆◇ミネラルオイル、ワセリン、水、ステアリン酸、ミリスチン酸オクチルドデシル、セタノール、酢酸トコフェロール、PG、TEA、水酸化 K、メチルパラベン、エチルパラベン、香料



★テココロ 50g(チューブ)、300g(ポンプ) アリミノ  
手荒れを予防する皮膚保護剤。

◇◆成分表示◆◇水、ラノリン脂肪酸オクチルドデシル、トリオクタノイン、グリセリン、ステアリン酸、ジメチコン、ポリパーフルオロメチルイソプロピルエーテル、ポリグルタミン酸、セージ葉エキス、グリチルリチン酸 2K、ティーツリー葉油、BG、水添レシチン、TEA、トコフェロール、カルボマー、(アクリル酸/アクリル酸アルキル(C10-30))コポリマー、フェノキシエタノール、ブチルパラベン、メチルパラベン



★アボプレックスハイインテンシティハンド&ネイルクリーム 50ml (爪クリーム) O・P・I  
爪切りの仕上げに塗ります。

◇◆成分表示◆◇水、イソドデカン、シクロペンタシロキサン、シア脂、セタノール、加水分解ケラチン、セテアリルメチコン、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸 PEG-100、ジメチコン、サリチル酸トリデシル、TEA、ポリソルベート 60、メチルパラベン、キサンタンガム、PG、水添アボカド油、カカオ脂、アーモンド油、オオミテングヤシ果実油、水添野菜油、レシチン、マクロシスティスピリフェラエキス、トリ(カプリル/カプリン酸)グリセリル、メチルイソチアゾリノン、ポリアミノプロピルビグアナイド、エタノール、パルミチン酸アスコルビル、オレイン酸



★Miss Mirage乳液 15ml 株式会社マイアス

## 爪の美容液

### 傷んだ爪の補修と健康を助けます

つめ育効果の「プラセンタエキス」「アラントイン」「オリゴペプチド-41」を配合。

爪の成長サイクルを考え、爪の補修成分「コラーゲン」「ケラチン」を配合。

保湿成分で潤いを与え、傷んだ爪を優しくケアし、保湿・保護・補修しながら健康な爪の成長を助けます。

\* 直射日光を避け、湿気の少ない涼しいところに保管してください。



◇◆成分表示◆◇水、ブドウ種子油、BG、オリーブ種子油、グリセリン、ホホバ種子油、カニナバラ果実油、サクシノイルアテロコラーゲン(ブタ)加水分解ケラチン(羊毛)、プラセンタエキス、アラントイン、オリゴペプチド-41、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、水銀化K、メチルパラベン、カルボマー、キサンタンガム、乳酸、エデド酸2Na、フェノキシエタノール、香料